

Alakítson ki saját szülő csomagot.



Operative Experience

RealMom	
Hüvelyi szülés 1021404	+ Egész alakos női gyakorlóbabu + Időre született magzat + Oktatói tablet + Betegmonitor
C-Celia	
Magzat kiemelése 1021386	+ Nyitott alhasi szimulátor és méh + 1 nagy magzat és 1 ikermagzat készlet + Több ezer szülés végrehajtását teszi lehetővé
Császármetszéshez szükséges készletek 1021392	+ Szimulátor hasi és méhmetszés összevarrásához + Terhes alhas és méh + Ernyedt has és üres méh + 50 hasi és 50 méhbetét amnionzsákkal
Szülés császármetszéssel 1021391	+ Terhes hasi szimulátor túlnyomásos vérzéssel és síkosítórendszerrel + 5 megtölthető méh + 13 hasi betét + 1 nagy magzat és 1 ikermagzat készlet
Szülés utáni vérzés 1021387	+ Nyitott hasi szimulátor túlnyomásos vérzéssel és síkosítórendszerrel + 2 többször használható méh
Sürgősségi hiszterekectómia 1021389	+ Nyitott hasi szimulátor túlnyomásos vérzéssel és síkosítórendszerrel + Méh, húgyhólyag, húgyvezeték és a méh artériáinak részletes ábrázolása

Elérhető cserealkatrészek


- Méhbemetszési betétek császármetszés oktatásához
1021393
- Hasi betétek és rekonstrukciós betétek (mindegyik két bemetszés és rekonstrukció elvégzésére alkalmas)
1021394
- Cserélhető méhek sürgősségi hiszterekectómiához
1021390
- Cserélhető hasi betét és terhes méh
1021396

VAJÚDÓ ÉS SZÜLŐ CSOMAG



A világ egyetlen komplett vajúdó és szülő csomagja

Bemutatjuk az első integrált megoldást a szülészeti képzés számára, amely **teljeskörűen műthető, „kéz a testben” szimulátorokat** tartalmaz szüléshez, császármetszéshez és a sürgősségi szülészeti eljárásokhoz.

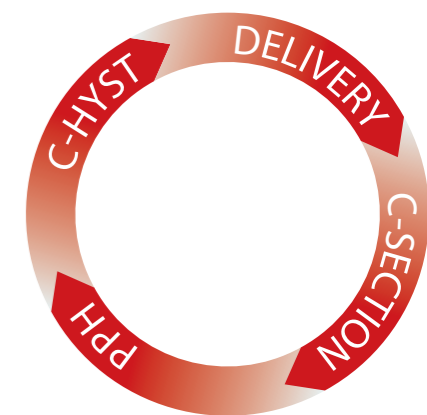

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany • 3bscientific.com
Telefon: +49 40 73966-0 • Fax: +49 40 73966-100 • E-mail: info@3bscientific.com

3bscientific.com

Szülő csomag az Operative Experience-től.

Végső soron ez egy teljes és integrált képzési lehetőség a vajúdas és szülés során szükséges teljes ellátási folyamat gyakorlására.

Búcsúzzon el a régi, megbízhatatlan műanyag gyakorlóbabukra épülő technológiától, és fedezze fel, milyen a valódi „kéz a testben” szimuláció. Az OEI szimulátorai teljes mértékben műthetők, hihetetlenül pontos és tapintható anatómiát, valóságghú vért és folyadékokat tartalmaznak, illetve egyedülállóan úgy tervezték őket, hogy magas adrenalinszinttel járó, valós operációs élményt nyújtsanak a tanulóknak.

Továbbá, az OEI esetén nincs szükség bonyolult programozásra vagy beállításokra, és nem esik ki idő a szimulátor leállítása miatt – termékeink egyszerű működésének köszönhetően.

RealMom™




Hüvelyi szülés

A világ legtermészetesebb és legvalóságghűbb hüvelyi szülési szimulátora.

- + Természetes szülés aktív, lágyszövet szülőcsatornával
- + Valóságghú, lágyszövet és pontos belső anatómia
- + Egész alakos női szimulátor és időre született magzat felülmúlhatatlan realizmussal és életszerű megjelenéssel
- + A szülési eljárások teljes választékát nyújtja, beleértve a fogó és vákuumeszközök használatát
- + Szülés utáni vérzéscsillapítás
- + A tágulás és a szülés előrehaladásának oktató általi irányítása
- + Az anyai és a magzati szívfrekvencia, magzati szívhangok, összehúzódások, pulzus, vérnyomás és SPO₂ élettani szemléltetése

C-Celia™

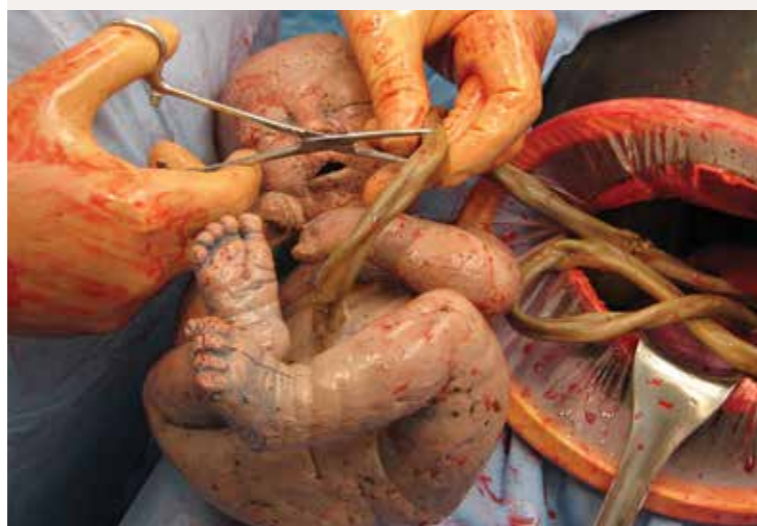

Császármetszés

Teljes, császármetszéses szüléshez alkalmas gyakorlórendszer, amely elérhető teljes csomagként vagy egyéni konfigurációkban, melyeket a tanulási igényeknek megfelelően terveztek.

- + Szimulátor magzat kiemeléséhez – nyitott, császármetszés utáni has, amely lehetővé teszi a bonyolult szülési műfogások, például a fogók és vákuumeszközök használatának bemutatását
- + Oktatómodell császármetszéshez szükséges készségek elsajátításához – hasi és bemetszés-rekonstrukciós szimulátor terhes hassal és méhvel a bemetszés és a szövetegyesítés gyakorlásához
- + Szimulátor sürgősségi császármetszéses szüléshez – terhes hasi szimulátor, amely lehetővé teszi a teljes transzverzális vagy vertikális sürgősségi császármetszés elvégzését a hasfalon és a magzatot, méhlepényt és mesterséges magzatvízzel teli túlnyomásos síkosítórendszert tartalmazó méhen keresztül



Szülés utáni vérzés

Nyitott hasi szimulátor a vérzéscsillapítási technikák gyakorlásához.

- + Gyakorlómodell szülés utáni vérzéscsillapításhoz, integrált túlnyomásos vérzéssel és síkosítással, az összetett szakadásos sérülések, valamint a méh artériás sérüléseinek ellátásához
- + Nyitott has üres, strapabíró, többször használható méhvel, amely a méh behelyezése előtt számos eljárást tesz lehetővé
- + Különböző a vérzéscsillapítási technikák, köztük a Bakri ballon, a B-Lynch varrat, a Hayman varrat és az O'Leary öltés gyakorlására van lehetőség



Sürgősségi hisztarektómia

A szülés utáni és a császármetszés közben történő hisztarektómias eljárások gyakorlása, beleértve a vérzéscsillapítást és a méh teljes eltávolítását.

- + Nyitott has vérzéssel és beépített síkosítóval, strapabíró, puha hasfalbetéttel, csatlakoztatható, részben összehúzódott méhvel.
- + A modell egy méhet, húgyhólyagot, húgyvezetéseket és a méh artériáinak részletes bemutatását tartalmazza